


Ulike

Air 10

Інструкція користувача
пристрою для видалення
волосся IPL*

Air Series

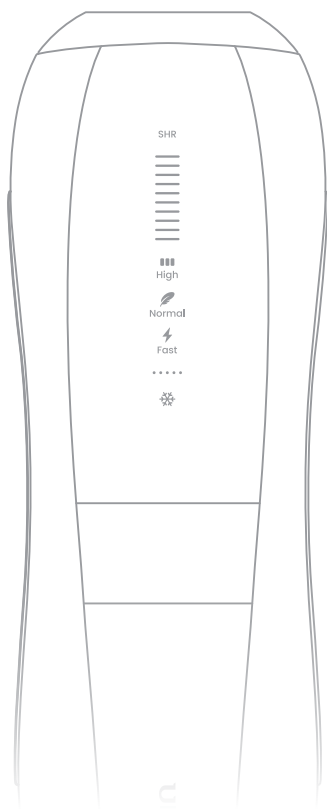

* IPL-пристрій використовує технологію Intense Pulsed Light. За технологією інтенсивного імпульсного світла шкіра обробляється делікатними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Це один із найефективніших методів видалення волосся, що надовго запобігає повторному росту.

Дякуємо, що обрали Ulike.

Компанія Ulike, заснована у 2013 році, з першого дня зосередилась на IPL-пристроях для видалення волосся в домашніх умовах.

Ми вважаємо, що видалення волосся має бути безпечним, комфортним та майже безболісним процесом.

І цей пристрій стане саме тією системою видалення волосся, яка вам сподобається.

Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас електронною поштою, телефоном або зв'яжіться із нами через наш веб-сайт

<https://ulike-ukraine.com>

Ми завжди готові допомогти!

Україна: support@ulike-ukraine.com

ЄС: de.ulike.com & de.support@ulikeglobal.com

Велика Британія: uk.ulike.com & uk.support@ulikeglobal.com

Франція: fr.ulike.com & fr.support@ulikeglobal.com

ЄС Amazon: eusupport@ulike.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

1-й корпус, офіс 810, Площа науки і техніки Сюньмей, вул. Кеюань 8, Спільнота наукових парків, мікрорайон Юехай, район Наньшань, Шеньчжень 518000, Гуандун, КНР (Китайська Народна Республіка).

Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з інструкцією користувача, включаючи всі протипоказання, попередження та інформацію щодо техніки безпеки, і зберігайте її для подальшого використання. Ілюстрації в даній інструкції наведені лише для ознайомлення.

Інформація про пристрій

Назва пристрою : IPL-Пристрій для видалення волосся

Модель пристрою: UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW

■ Показання до застосування

IPL-Пристрій для видалення волосся призначений для видалення небажаного волосся. Пристрій також показаний для довгострокового зниження росту волосся, що визначається як довготривале стабільне зменшення кількості відрослого волосся при вимірюванні через 6, 9 і 12 місяців після завершення курсу процедур.

■ Комплектація

Пакування містить наступне:

IPL-пристрій для видалення волосся*1

Адаптер*1


Кабель живлення *1

Інструкція користувача *1

Бритва*1

Окуляри*1

■ Будова пристрою

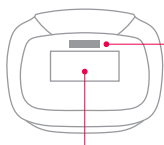

Датчик розпізнавання шкіри

Сапфірове світлове віконце



Індикатор видалення волосся

Індикатор потужності

Індикатор інтенсивного режиму

Індикатор нормального режиму

Індикатор швидкого режиму

Індикатор автоматичного ковзання

Індикатор охолоджуючого режиму

Індикатор розпізнавання шкіри

Кнопка освітлення

Кнопка супервидалення

волосся
Увімкнути/Вимкнути
/Кнопка зміни режиму



IPL-Пристрій




Роз'єм подачі живлення




Окуляри



Адаптер

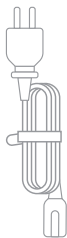

Кабель живлення

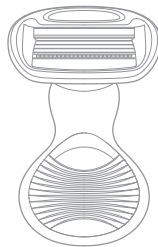

Бритва

■ Принцип роботи

IPL-Пристрій для видалення волосся є пристроєм на основі інтенсивного імпульсного світла для тривалого видалення волосся, призначеним для домашнього використання. Він призначений для видалення небажаного волосся та тривалого зниження повторного росту волосся. Ідеальний для видалення небажаного волосся на пахвах, лінії бікіні, руках та ногах. Пристрій використовує технологію IPL з нижчим рівнем імпульсів, включаючи 4 режими потужності. Технологія інтенсивного імпульсного світла здатна досягати тривалих результатів видалення волосся при значно нижчому рівні імпульсів, ніж використовується в інших пристроях для видалення волосся на основі світла. Принцип роботи полягає в селективному фототермолізі, а механізм дії полягає в зупиненні росту волосся за допомогою світла, яке нагріває і нейтралізує волосяну цибулину.

Інструкція з використання


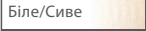

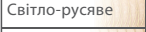




■ Зони використання

IPL-Пристрій для видалення волосся призначений для видалення волосся на великих ділянках (наприклад, руки, ноги, груди) і невеликих ділянках (наприклад, пальці, верхня губа). Будь ласка, перевірте таблицю тонів шкіри нижче, щоб визначити, чи підходить вам IPL.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ДОПУСТИМИХ ТИПАХ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ

Цей пристрій призначений лише для використання на типах шкіри I-V за шкалою Фіцпатріка. Будь ласка, ознайомтеся з таблицею нижче.

- Будь ласка, **ВИЗНАЧТЕ** тон своєї шкіри та перегляньте наступну таблицю, щоб дізнатися, чи підходить вам пристрій.

Колір шкіри \ Колір волосся						
	Біла	Бежева	Світло-коричнева	Середньо-коричнева	Темно-коричнева	Чорно-коричнева і темніша
 Біле/Сиве	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Руде	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Світло-русяве	✗	✗	✗	✗	✗	✗
 Світло-каштанове	✓	✓	✓	✓	✓	✗
 Каштанове	✓	✓	✓	✓	✓	✗
 Темно-каштанове	✓	✓	✓	✓	✓	✗
 Чорне	✓	✓	✓	✓	✓	✗

(Примітка: ✗ означає не підходить, ✓ означає підходить)

ЗАУВАЖТЕ:

- Виберіть режим, який найкраще відповідає переносимості вашої шкіри, і, якщо немає побічних реакцій, поступово переходьте до режимів з більшою інтенсивністю.
- Колір вашої шкіри може змінитися, наприклад, якщо ви засмагали: вона може бути темнішою, ніж під час попередньої процедури. Тому важливо перевіряти налаштування перед кожним сеансом та встановлювати різні налаштування відповідно до різних ділянок. Деякі ділянки можуть бути темнішими за інші.
- Користувачі зі шкірою типу V повинні використовувати пристрій

з особливою обережністю оскільки вони мають більшу ймовірність виникнення небажаних наслідків. Якщо ви вагаєтесь з визначенням свого типу шкіри між типами V та VI, будь ласка, проконсультуйтеся із лікарем.

■ Перед використанням

Використайте бритву, що була у комплекті разом із пристроєм, щоб видалити все видиме волосся перед використанням пристрою. Переконайтеся, що на поверхні шкіри не залишилося волосся, оскільки це може викликати дискомфорт під час процедури. Змийте будь-які косметичні засоби, лосьйони та креми з ділянки, яку ви хочете обробити. Очистіть оброблювану ділянку та витріть її насухо.

■ Тест на чутливість шкіри


- Перш ніж розпочати першу процедуру, **МИ РЕКОМЕНДУЄМО**

перевірити реакцію шкіри.


- Виберіть ділянку тіла, яку плануєте обробляти. Під'єднайте адаптер до пристрою, підключіть кабель живлення та під'єднайте його до джерела живлення. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Щільно притисніть сапфірове світлове віконце до вибраної ділянки шкіри, поки не загориться індикатор датчика шкіри. Перемістіть пристрій на іншу ділянку для тестування та змініть режим, натисніть кнопку освітлення, щоб провести ще один тест. Якщо відчуття комфортні, змініть режим та спробуйте пристрій на іншій ділянці.

- Не робіть більше одного спалаху на одному місці. Зачекайте 2 години після тестування, щоб переконаватися, що ваша шкіра підходить для процедури і немає негативної реакції на світлові імпульси. Якщо через 2 години не виявлено жодних змін на шкірі, і ви не відчували інтенсивного тепла під час тесту, тоді вищий режим, який ви використовували, підходить для вашої шкіри. Ви можете продовжувати тестувати потужніший режим, поки не знайдете максимальний прийнятний рівень для вибраної ділянки шкіри.


■ Інструкція

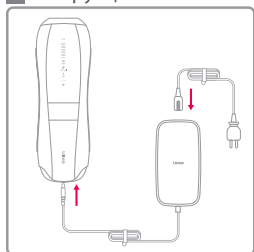


1. Підключіть кабель живлення, адаптер та I PL-пристрій, як показано на малюнку.

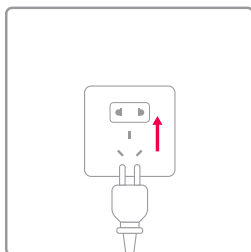

2. Підключіть інший кінець кабелю живлення до розетки. (Примітка: Це пристрій, який працює від мережі, тому тримайте його підключеним до живлення під час процедури. В іншому випадку він не працюватиме).

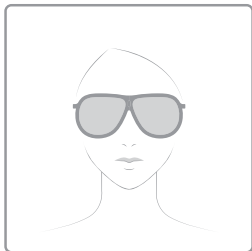


3. Надягніть захисні окуляри перед початком процедури.

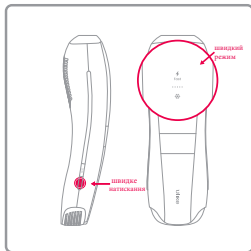

4. Натисніть кнопку живлення збоку пристрою, щоб увімкнути його. Режим за замовчуванням — швидкий режим, функція охолодження буде активована автоматично (світловий індикатор відповідного режиму загориться на пристрої).

Примітка: Функція охолодження розроблена для покращення процесу видалення волосся, але сама по собі не має жодного терапевтичного ефекту.

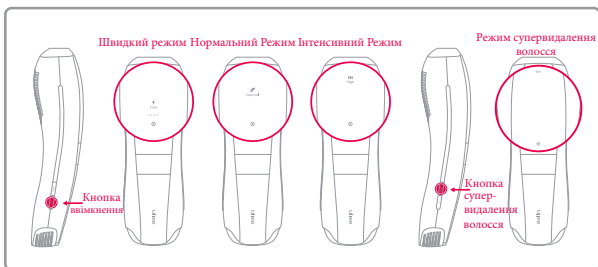

5. Пристрій має 4 режими.

Під час роботи пристрою натисніть кнопку живлення, щоб переключитися на бажаний режим процедури. Режими змінюються в такому порядку: Швидкий режим - Нормальний режим - Інтенсивний режим - Нормальний режим - Швидкий режим. Натисніть кнопку супервидалення волосся, щоб увімкнути або вимкнути режим супервидалення волосся.


■ Інструкції для режиму супервидалення волосся

Режим супервидалення волосся

Рекомендована зона для обробки: пахви та зона бікіні (зона з густим волоссям)
Рекомендована кількість спалахів на шкірній зоні: 2-3 рази
Примітка: Режим супервидалення волосся (Зверніть увагу, що цей режим накопичує тепло за допомогою кількох світлових імпульсів IPL, а не лазера.)

Корисні поради:


Перед початком використання рекомендується спершу протестувати швидкий режим на шкірі. Після того, як ви переконаєтеся, що на обробленій ділянці немає ніяких реакцій, можна сміливо використовувати пристрій. Рекомендована послідовність: Швидкий Режим—Нормальний Режим —Інтенсивний Режим—Режим Супервидалення Волосся. Через високу потужність Режиму Супервидалення Волосся, спочатку скористайтеся трьома іншими режимами, і лише після того, як шкіра звикне, переходьте до режиму Супервидалення Волосся.

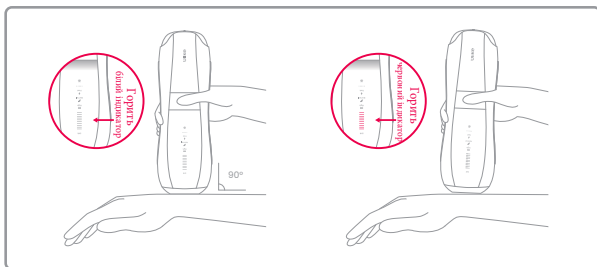

6. А. Спочатку розмістіть сапфірове віконце освітлення вертикально на ділянці шкіри, яку потрібно обробити.

В. Переконайтеся, що воно повністю контактує зі шкірою, про що свідчатиме білий індикатор розпізнавання шкіри.

С. Нарешті, натисніть кнопку освітлення, щоб розпочати видалення волосся. Примітка: Якщо загориться червоне світло, це означає недостатній контакт між віконцем освітлення та шкірою, і пристрій не випромінюватиме імпульси світла.

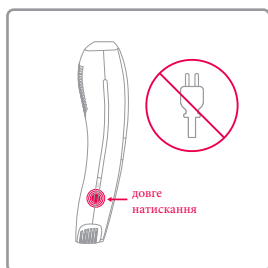


7. Після завершення процедури натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 1-2 секунди, щоб вимкнути пристрій. Індикатор світла вимкнеться, що свідчатиме про те, що пристрій вимкнувся. Важливо не відключати пристрій безпосередньо від розетки, не вимкнувши його належним чином.

Примітка: Пристрій оснащено модулем контролю швидкості вентилятора, який моніторить його швидкість. Якщо швидкість вентилятора буде нижче 70% від номінальної, пристрій автоматично вимкнеться, щоб уникнути перегріву, що може призвести до опіків.

■ Датчик розпізнавання шкіри

1. Датчик визначає колір шкіри, регулюючи інтенсивність в залежності від розпізнаного відтінку.
2. Переконайтеся, що датчик повністю контактує зі шкірою.
3. Якщо буде виявлено прийнятний відтінок шкіри, індикатор загориться білим; якщо сенсор не буде у повному контакті з шкірою або виявить неприйнятний відтінок шкіри, індикатор загориться червоним.

Методи проведення процедури

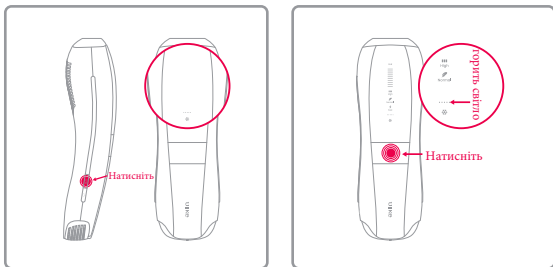


1. Пристрій пропонує два різні режими: режим Автоматичного Ковзання і Ручний режим.
2. Як переключити режим? — Натисніть і утримуйте кнопку освітлення протягом 1-2 секунд, щоб перейти в режим Автоматичного Ковзання або Ручний режим.
3. Варто зазначити, що Режими Швидкий, Нормальний, інтенсивний підтримують як режим Автоматичного Ковзання, так і Ручний режим; Режим Супервидалення волосся підтримує лише Ручний режим.

• Ручний режим (підходить для невеликих ділянок, таких як верхня губа):


Ручний режим є режимом за замовчуванням при ввімкненні.

Розмістіть віконце освітлення вертикально на ділянці обробки, забезпечивши повний контакт зі шкірою. Індикатор розпізнавання шкіри загориться білим. Натисніть кнопку освітлення, щоб розпочати видалення волосся. Перемістіть віконце освітлення на наступну ділянку та повторіть вказані вище кроки.

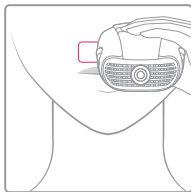

• Режим Автоматичного Ковзання (для великих ділянок, таких як руки, ноги):

Натисніть і утримуйте кнопку освітлення протягом 1-2 секунд, загориться індикатор Автоматичного Ковзання. Переконайтеся, що віконце освітлення повністю контактує зі шкірою, продовжуйте рухати пристрій по ділянці, щоб забезпечити рівномірну обробку та уникнути пропуску ділянок шкіри.

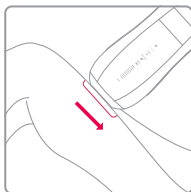

Пристрій автоматично випромінює імпульси світла з заданими інтервалами, що виключає необхідність ручного втручання. У режимі Автоматичного Ковзання натисніть кнопку освітлення ще раз на 1-2 секунди, щоб перейти в Ручний режим.

■ Рекомендований курс процедур

Тижні 1-4: виконуйте процедуру через день. З 5-го тижня: відкоригуйте графік до одного разу на два тижні або одного разу на місяць, в залежності від росту волосся. Зверніть увагу, що ви можете підлаштувати курс відповідно до типу вашого волосся. Для густого волосся можете розглянути можливість використання більш інтенсивних режимів і частоти процедур із урахуванням вашої чутливості до пристрою. Пам'ятайте: ріст волосся у кожної людини різний, тому результати можуть відрізнятись.

■ Догляд за шкірою після процедури

Після видалення волосся рекомендується наносити лосьйон для тіла або охолоджуючий гель для догляду за шкірою. Крім того, уникайте потрапляння сонячних променів на оброблені ділянки. Почекайте щонайменше 48 годин після процедури, перш ніж піддавати шкіру прямому сонячному світлу. Також уникайте засобів догляду за шкірою, що містять спирт або кислотні/лужні речовини.

■ Протипоказання

Використання IPL-пристрою для видалення волосся підходить не всім. Будь ласка, детально ознайомтеся з наступною інформацією перед використанням пристрою.

- НЕ використовуйте пристрій на шкірі з опіками, татуваннями або шрамами, щоб уникнути подальшого травмування.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо ваша шкіра нещодавно отримала штучну або природню засмагу або обгоріла від надмірного впливу сонячного світла. Ваша шкіра може бути дуже чутливою після засмаги та особливо сприйнятливою до побічних ефектів процедури IPL (наприклад, опіків шкіри, пухирів, зміни кольору або рубців).
- НЕ використовуйте, якщо ви чутливі до сонячного світла (фоточутливість) або приймаєте ліки, які викликають фоточутливість, наприклад, певні антибіотики, такі як тетрациклін, НПЗП (Нестероїдні протизапальні препарати), такі як ібупрофен, або ретиноїди, такі як Аккутан, та/або місцеві ретиноїди, такі як Ретин А. Завжди перевіряйте інструкції, що надані разом із вашими медикаментами, щоб перевірити, чи фоточутливість вказана як побічний ефект. Зверніться до лікаря, якщо ви не впевнені, чи підходить вам використання IPL-пристрою для видалення волосся. Використання пристрою на світлочутливій шкірі може призвести до пошкодження шкіри, включаючи пухирі та набряки.
- НЕ використовуйте пристрій, якщо у вас в анамнезі є рак шкіри або передракові ураження (наприклад, невуси або велика кількість родимок).
- НЕ використовуйте при вагітності, годуванні грудьми або під час менструації.
- НЕ використовуйте пристрій для осіб молодше 18 років. Наслідки використання пристрою в цій віковій групі невідомі.

■ Застереження

- НЕ використовуйте пристрій на наступних ділянках:
 - Яєчка, геніталії та соски.
 - Темно-коричневі або чорні плями, такі як родимки, невуси або бородавки.
 - Татування або перманентний макіяж.
 - Ділянки, уражені шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, вітіліго, екзема, акне, простий герпес, активні інфекції або рани.
 - Ділянки, на яких проводилася пластична операція.
 - Поблизу або навколо очей.
- НЕ перевищуйте норму використання, рекомендовану в даній інструкції. Після тривалого або багаторазового використання на одній ділянці, може виникнути пошкодження шкіри.

■ БЕЗПЕКА ОЧЕЙ

Під час процедури пристрій випромінює інтенсивні імпульси світла, і пряме опромінення може призвести до пошкодження очей.

- НЕ дивіться прямо у віконце опромінення, коли пристрій увімкнено.
- НЕ намагайтеся активувати пристрій, направляючи його до очей.
- НЕ обробляйте зони навколо очей, такі як брови або виї.

Рекомендується надягати захисні окуляри та відводити погляд від пристрою під час активації кнопки освітлення. Крім того, під час процедури рекомендується уникати направлення отвору для входу повітря у напрямку очей. Це забезпечує належний контакт пристрою із зоною обробки, гарантуючи ефективну передачу світла, одночасно захищаючи очі від розсіяного світла.

■ ЕЛЕКТРИЧНА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

• НЕ розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте пристрій без присутності професійного персоналу, оскільки це може призвести до пошкодження, збою в роботі або травм. Сервісне обслуговування надається в авторизованому сервісному центрі. У разі необхідності виробник може надати схеми електричних з'єднань, списки деталей та інструкції з калібрування, щоб допомогти сервісному персоналу в ремонті пристрою. Будь-які несанкціоновані модифікації заборонені, оскільки вони можуть призвести до неприпустимого ризику. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або зламаний; наприклад, має тріщини в корпусі, пошкодження кабелю (видно внутрішні дроти), тріснуте або розбите світлове віконце тощо.

• НЕ використовуйте поблизу ванн, душових кабін, умивальників або інших ємностей з водою. Пристрій не можна використовувати поблизу води.

НЕ використовуйте пристрій, якщо він стає неприємно гарячим на дотик.

- НЕ намагайтеся активувати спалах пристрою на будь-якій поверхні, окрім шкіри.
- НЕ блокуйте вентиляційні отвори з обох боків пристрою.
- НЕ проводьте технічне обслуговування під час використання.
- НЕ залишайте увімкнений пристрій без нагляду, щоб уникнути ризику пожежі або опіків.

■ Неприйнятне використання

- Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою, щоб уникнути ризику пожежі чи опіків.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці, щоб вони не гралися з пристроєм для уникнення ризику пожежі та опіків.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити компанія Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., сервісний центр, уповноважений Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- Вода та електрика — небезпечне поєднання! Уникайте ризику ураження електричним струмом.
 - Не використовуйте цей пристрій у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, біля душу чи басейну);
 - Не допускайте попадання води всередину приладу.
- Перед підключенням пристрою перевірте, чи напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі місцевої електромережі, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або значного пошкодження пристрою.
- Якщо розетка, яка використовується для живлення пристрою, має погане з'єднання, вилка пристрою може нагріватися. Переконайтеся, що ви підключили пристрій до правильно встановленої розетки, щоб уникнути ризику пожежі та опіків.
- НЕ піддавайте пристрій сильним ударам, щоб уникнути ризику пошкодження лампи.
- УВАГА: Завжди від'єднуйте прилад від мережі після використання та у разі відключення електроенергії, щоб уникнути ризику пошкодження пристрою.
- Класифікація групи ризику: "ризик мінімальний або відсутній"
- Тримайте пристрій подалі від ворсинок, пилу та світла, інакше його ефективність може бути знижена.
- Тримайте пристрій у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- НЕ піддавайте оброблені ділянки сонячному світлу. Зачекайте щонайменше 48 годин після обробки, перш ніж піддавати оброблену шкіру впливу прямих сонячних променів. Ваша шкіра може бути дуже чутливою після процедури IPL, особливо уразливою до сонячних опіків. Нанесіть сонцезахисний крем (SPF 15 або вище) на оброблену ділянку або накрийте оброблену ділянку належним одягом.

■ Застереження

- Пристрій призначений для одного користувача.
- Для використання не потрібні професійні навички та навчання, перед використанням ознайомтеся з інструкцією користувача.
- Цей пристрій не рекомендується використовувати на рудому, сивому, світлому або пушковому волоссі, оскільки він неефективний на такому волоссі.

Технічне обслуговування

■ Очищення пристрою

Щоб досягти найкращих результатів і продовжити термін служби пристрою, очищайте його перед кожним використанням і після нього, щоб уникнути накопичення бруду.

- Перед очищенням пристрій необхідно вимкнути та від'єднати від мережі, щоб він охолонув.

Використовуйте м'яку, чисту та суху тканину, щоб протерти поверхню віконця освітлення.

Ніколи не мийте продукт та комплектуючі під проточною водою або у посудомийній машині.

Не використовуйте абразивні засоби (зубна паста тощо) або корозійні рідини (бензин, моторне масло, ацетон тощо) для очищення приладу.

Примітка: Якщо вода погано очищає, скористайтесь тканиною, змоченою в спирті з концентрацією 75%, для очищення пристрою.

Після завершення очищення проведіть візуальний огляд, щоб перевірити наявність залишкового бруду. Якщо пристрій виглядає брудним, повторіть наведені вище кроки очищення.

■ Зберігання

- Очистіть пристрій перед тим, як прибрати його для зберігання.

- Зберігайте пристрій у сухому, безпиллому середовищі при температурі від -10° С до +55° С.

Утилізація

Щоб зменшити ризики для здоров'я та навколишнього середовища і забезпечити можливість переробки матеріалів, цей продукт слід утилізувати в спеціалізованому пункті збору для відходів електричних та електронних пристроїв відповідно до місцевих екологічних вимог.



Усунення несправностей

Нижче наведено короткий опис найбільш поширених проблем, з якими ви можете зіткнутися при використанні пристрою. Якщо ви не зможете вирішити проблему на основі інформації, наведеної нижче, будь ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора або продавця.

Проблема	Можлива Причина	Вирішення
Не вдається запустити пристрій	Пристрій не під'єднано до розетки	Перевірте, чи пристрій під'єднано до розетки.
Віконце освітлення не повністю прилягає до шкіри	Віконце освітлення може бути не в повному контакті із вашою шкірою.	Переконайтеся, що віконце освітлення повністю прилягає до вашої шкіри; як тільки індикатор розпізнавання шкіри загориться білим, натисніть кнопку освітлення.
Нестерпний біль під час процедури	Волосся на оброблюваній ділянці не було поголене.	Поголіть волосся в оброблюваній ділянці перед процедурою. Якщо цього не зробити, пристрій може спалити поверхневі волоски, що може викликати дискомфорт.
	Вибраний режим занадто потужний	Виберіть менш інтенсивний режим.
	Світлове віконце пошкоджене	Перевірте віконце освітлення на наявність водяного туману через 30 секунд з моменту ввімкнення пристрою. Якщо його немає, будь ласка, зверніться до служби підтримки Ulife для подальшої допомоги.
Зона обробки червоніє після процедури	Невелике почервоніння є нормальним і безпечним для організму, і незабаром зникне.	Нанесіть гель алое вера, щоб заспокоїти шкіру, або скористайтеся охолоджуючим режимом.
Незадовільний результат видалення волосся	Цей пристрій не підходить для вашого відтінку шкіри або кольору волосся.	Якщо ваше волосся блондинисте, сиве, червоне або біле, процедура не буде ефективною
	Пропущені деякі ділянки в оброблюваній зоні.	Спалахи мають бути на близькій відстані один від одного, і між зонами спалахів має бути невелике перекриття.
	Використання занадто низької потужності.	Будь ласка, виберіть потужніший режим наступного разу.
	Недостатня частота використання.	Для кращих результатів видалення волосся ми рекомендуємо наступну частоту процедур: Тижні 1-4: через день Тижні 5-12: раз на 2 тижні або раз на місяць.
	Ваша реакція на світлові імпульси повільна, або волосся, яке потрібно видалити, є густим.	Ділянки з густим волоссям, такі як лінія бікіні, пахви та борода, можуть вимагати більше часу та повторних процедур для досягнення значного зменшення. Різні типи шкіри можуть довше реагувати на світлові імпульси, тому рекомендується продовжувати використання нашого пристрою до 3 місяців для досягнення оптимальних результатів.
Під час використання пристрій нагрівається і стає вологим	Можливо, через тривалість процедури	Вимкніть пристрій і залиште його на кілька хвилин.

Технічні характеристики

Назва Пристрою	IPL-Пристрій для видалення волосся
Модель Пристрою	UI20 DB, UI20 RE, UI20 GP, UI20 PW Примітка: Різниця між моделями полягає лише в кольорі корпусу: UI20 DB — фіолетовий, UI20 RE — рожевий, UI20 GP — золотий, UI20 PW — сріблястий.
Розміри (ширина*висота*глибина)	207мм*69мм*54мм
Вхідна потужність	24В \approx 3.75А, 90Вт
Режими	1~10 режимів
Розмір світлового віконця	3.9см ²
Довжина хвилі	550нм~1200нм
Вихідна енергія	5.0Дж~26.0Дж
Енергоємність	1.28Дж/см ² ~6.66Дж/см ²
Тривалість імпульсу	0.4мс~2.0мс
Програмне забезпечення	V1.0
Умови експлуатації	Температура експлуатації: 5°C ~ 30°C Вологість: 5% ~ 80% відносної вологості Відносний тиск: 80 кПа ~ 106 кПа.
Умови зберігання та транспортування	Температура зберігання: -10°C ~ 55°C Вологість: 5% ~ 90% відносної вологості Відносний тиск: 50 кПа ~ 106 кПа."
Після зберігання пристрою при найнижчій температурі навколишнього середовища (-10° С) пристрою потрібен певний час, щоб повернутися до нормальної роботи при температурі навколишнього середовища 20°C.	2 години
Після зберігання пристрою при найвищій температурі навколишнього середовища (60°C) пристрою потрібен певний час, щоб повернутися до нормальної роботи.	2 години

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Рекомендації щодо електромагнітної сумісності

- Попередження: Не використовуйте поблизу активного високочастотного хірургічного пристрою та радіоекранованого приміщення системи магнітно-резонансної томографії, де інтенсивність електромагнітних хвиль є високою.
- Попередження: Слід уникати використання цього пристрою поруч з іншим пристроєм або разом із ним, оскільки це може призвести до неправильної роботи. Якщо таке використання є необхідним, слід спостерігати за обома пристроями, щоб переконатися, що вони працюють нормально.
- Попередження: Використання комплектуючих, датчиків і кабелів, відмінних від зазначених або наданих виробником цього пристрою, може призвести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості цього пристрою і, як наслідок, до неправильної роботи.
- Попередження: Портативний радіочастотний пристрій зв'язку (включаючи периферійні пристрої, такі як антенні кабелі та зовнішні антени) слід використовувати на відстані не ближче 30 см від будь-якої частини пристрою, включаючи кабелі, зазначені виробником. В іншому випадку це може призвести до погіршення продуктивності цього пристрою.

Цей пристрій відповідає наступним стандартам:

EN 55014-1

EN55014-2

EN 61000-3-2

EN61000-3-3

EN 62233

EN 60335-1

EN 60335-2-23

IEC 60335-2-113

IEC 62471

BS EN 60335-2-23;

BS EN 60335-1 ; BS EN 62233 ; BS EN

55014-1 ;









BS EN 55014-2 ;

BS EN IEC 61000-3-2;

BS EN 61000-3-3

Умовні позначення

№	Умовні позначення	Опис
1		Використання в приміщенні
2		WEEE (Відходи електричних та електронних пристроїв). Відходи повинні перероблятися відповідно до законодавства
3		Тримайте в сухому місці

№	Умовні позначення	Опис
4		Виробник
5		Попереджувальний символ для користування пристроєм-ІРЛ: Не направляйте його безпосередньо на очі, оскільки імпульси світла, що випромінюються цим приладом, можуть призвести до ушкодження очей.
6		ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
7		Джерело постійного струму
8		Максимальна кількість ідентичних транспортних упаковок або товарів, які можна покласти на нижню упаковку, становить 5.
9		Обережно!
10		Не використовуйте цей пристрій у ванні, душі або резервуарі, заповненому водою.
11		Продукти, позначені цим символом, відповідають вимогам директив ЄС.
12	RoHS	Продукти, позначені цим символом, відповідають вимогам директиви RoHS 2011/65/EU зі змінами (EU) 2015/863.
13		Уповноважений представник у Європейській Спільноті/ Європейському Союзі.

Гарантія

Політика гарантійного обслуговування повністю відповідає чинному законодавству.

На продукт поширюється право на безкоштовне повернення протягом 30 днів та 2-річна гарантія* починаючи з дати покупки. Однак у гарантії може бути відмовлено за наступних обставин:

- Невиконання інструкцій з експлуатації та обслуговування.
- Неправильне використання, яке спричинило пошкодження приладу.
- Перевищення допустимих умов використання (наприклад, зависока температура, корозія тощо), що призвело до пошкодження приладу.
- Сторонні зовнішні впливи (падіння, стиснення, удар тощо), що спричинили пошкодження приладу.
- Природні лиха (пожежа, повінь, блискавка, удар тощо), що спричинили пошкодження продукту.
- Використання комплектуючих та деталей сторонніх виробників які спричинили пошкодження продукту.

*Будь ласка, ознайомтеся з правилами та умовами на офіційному сайті Ulike.

Контактна інформація



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

1-й корпус, офіс 810, Площа науки і техніки Сюньмей, вул. Кеюань 8, Спільнота наукових парків, мікрорайон Юехай, район Наньшань, Шеньчжень 518000, Гуандун, КНР (Китайська Народна Республіка).

Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся до нас електронною поштою, телефоном або зв'яжіться з нами через наш веб-сайт <https://ulike-ukraine.com/>

Ми завжди готові допомогти!

Україна: support@ulike-ukraine.com

Європейський Союз: de.ulike.com & de.support@ulikeglobal.com

Велика Британія: uk.ulike.com & uk.support@ulikeglobal.com

Франція: fr.ulike.com & fr.support@ulikeglobal.com

ЄС Amazon: eusupport@ulike.com

Уповноважений представник



Назва: Ulike Europe SAS

Адреса: вул. Рояль 4, 75008, Париж, Франція

Контакт: Рафаель.

E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com



Назва: Kingsmead Service Limited

Адреса: 19-й мезонін, вул. Кроуфорд 19-21, Лондон, Англія W1H 1PJ

Контакт: Пень Ян

E-mail: office@kingsmead-service.com