


# Ulike

## Інструкція користувача пристрою для видалення волосся IPL\*

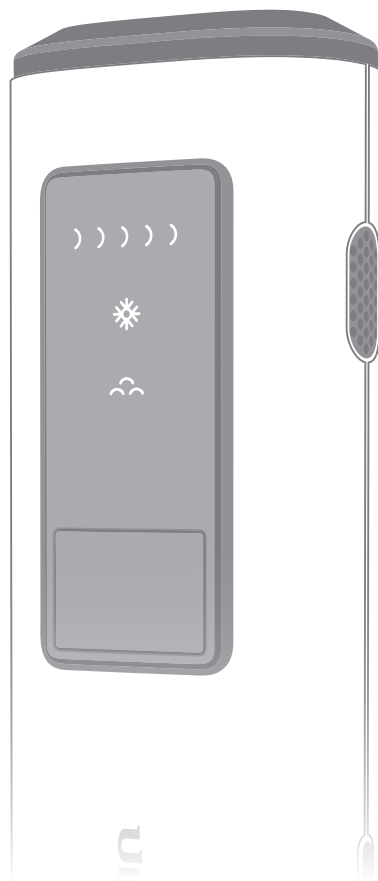

Версія 1.0

01.08.2024

\* IPL-пристрій використовує технологію Intense Pulsed Light. За технологією інтенсивного імпульсного світла шкіра обробляється делікатними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Це один із найефективніших методів видалення волосся, що надовго запобігає повторному росту.

Дякуємо, що обрали Ulike.

Компанія Ulike, заснована у 2013 році, з першого дня зосередилась на IPL-пристроях для видалення волосся в домашніх умовах.

Ми вважаємо, що видалення волосся має бути безпечним, комфортним та майже безболісним процесом.

І цей пристрій стане саме тією системою видалення волосся, яка вам сподобається.

Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас електронною поштою [support@ulike-ukraine.com](mailto:support@ulike-ukraine.com), або зв'яжіться з нами через наш веб-сайт <https://ulike-ukraine.com/>

Ми завжди готові допомогти!



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.  
1-й корпус, офіс 810, Площа науки і техніки Сюньмей, вул. Кеюань 8, Спільнота наукових парків, мікрорайон Юехай, район Наньшань, Шеньчжень 518000, Гуандун, КНР (Китайська Народна Республіка).

# 1. Техніка безпеки

## 1.1 Протипоказання

Використання IPL-пристрою для видалення волосся підходить не всім. Будь ласка, детально ознайомтеся з наступною інформацією перед використанням пристрою. **НЕ** використовуйте пристрій на шкірі з опіками, татуваннями або шрамами, щоб уникнути подальшого травмування.

**НЕ** використовуйте пристрій, якщо ваша шкіра нещодавно отримала штучну або природню засмагу або обгоріла від надмірного впливу сонячного світла. Ваша шкіра може бути дуже чутливою після засмаги та особливо сприйнятливою до побічних ефектів процедури IPL (наприклад, опіків шкіри, пухирів, зміни кольору або рубців).

**НЕ** використовуйте, якщо ви чутливі до сонячного світла(фоточутливість) або приймаєте ліки, які викликають фоточутливість, наприклад, певні антибіотики, такі як тетрациклін, НПЗП (Нестероїдні протизапальні препарати), такі як ібупрофен, або ретиноїди, такі як Аккутан, та/або місцеві ретиноїди, такі як Ретин А. Завжди перевіряйте інструкції, що надані разом із вашими медикаментами, щоб перевірити, чи фоточутливість вказана як побічний ефект. Зверніться до лікаря, якщо ви не впевнені, чи підходить вам використання IPL- пристрою для видалення волосся. Використання пристрою на світлочутливій шкірі може призвести до пошкодження шкіри, включаючи пухирі та набряки.

**НЕ** використовуйте пристрій, якщо у вас в анамнезі є рак шкіри або передракові ураження (наприклад, невуси або велика кількість родимок).

**НЕ** використовуйте при вагітності, годуванні грудьми або під час менструації.

**НЕ** використовуйте пристрій для осіб молодше 18 років. Наслідки використання пристрою в цій віковій групі невідомі.

## 1.2 Застереження

**НЕ** використовуйте пристрій на наступних ділянках:

- ✓ Соски, внутрішні статеві губи, піхва, геніталії, ареоли або навколо анального отвору.
- ✓ Темно-коричневі або чорні плями, такі як родимки, невуси або бородавки.
- ✓ Татування або перманентний макіяж.
- ✓ Ділянки, уражені шкірними захворюваннями, такими як псоріаз, вітіліго, екзема, акне, простий герпес, активні інфекції або рани.
- ✓ Ділянки, на яких проводилася пластична операція.
- ✓ Поблизу очей.
- ✓ Чоловікам забороняється використовувати цей продукт на обличчі або статевому члені. **НЕ** перевищуйте норму використання, рекомендовану в даній інструкції. Після тривалого або багаторазового використання на одній ділянці, може виникнути пошкодження шкіри.

## БЕЗПЕКА ОЧЕЙ



Під час процедури пристрій випромінює інтенсивні імпульси світла, пряме опромінення може призвести до пошкодження очей.

**НЕ** дивіться прямо у віконце опромінення, коли пристрій увімкнено.

**НЕ** намагайтеся активувати пристрій, направляючи його до очей.

**НЕ** обробляйте зони навколо очей, такі як брови або вії.

Рекомендується надягати захисні окуляри та відводити погляд від пристрою під час активації кнопки освітлення.

## ЕЛЕКТРИЧНА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

**НЕ** розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте пристрій без присутності професійного персоналу, оскільки це може призвести до пошкодження, збою в роботі або травм. Сервісне обслуговування надається в авторизованому сервісному центрі. У разі необхідності виробник може надати схеми електричних з'єднань, списки деталей та інструкції з калібрування, щоб допомогти сервісному персоналу в ремонті пристрою. Будь-які несанкціоновані модифікації заборонені, оскільки вони можуть призвести до неприпустимого ризику.

**НЕ** використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або зламаний; наприклад, має тріщини в корпусі, пошкодження кабелю (видно внутрішні дроти), тріснуто або розбите світлове віконце тощо.

**НЕ** використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений або зламаний; наприклад, тріснутий корпус, пошкоджений кабель (видно внутрішні проводи), тріснуто або зламане світлове віконце тощо.

**НЕ** використовуйте поблизу ванн, душових кабін, умивальників або інших ємностей з водою. Пристрій не можна використовувати поблизу води.

**НЕ** використовуйте пристрій, якщо він стає неприємно гарячим на дотик. **НЕ** намагайтеся активувати спалах пристрою на будь-якій поверхні, окрім шкіри. **НЕ** блокуйте вентиляційні отвори з обох боків пристрою.

**НЕ** проводьте технічне обслуговування під час використання.

**НЕ** розміщуйте IPL-пристрій для видалення волосся далеко від електричної розетки. **НЕ** залишайте увімкнений пристрій без нагляду, щоб уникнути ризику пожежі або опіків. Цей пристрій **НЕ** призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під надглядом або отримали інструкції щодо використання пристрою, щоб уникнути ризику пожежі чи опіків. Цей пристрій **НЕ** призначений для використання дітьми. Тримайте пристрій в недоступному для дітей місці, щоб вони не гралися з пристроєм для уникнення ризику пожежі та опіків. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити компанія Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.,

сервісний центр, уповноважений Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом. Вода та електрика — небезпечне поєднання! Уникайте ризику ураження електричним струмом:

- Не використовуйте цей пристрій у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, біля душу чи басейну).
- Не допускайте попадання води всередину приладу.
- Перед підключенням пристрою перевірте, чи напруга, зазначена на пристрої, відповідає напрузі місцевої електромережі, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або значного пошкодження пристрою.

Якщо розетка, яка використовується для живлення пристрою, має погане з'єднання, вилка пристрою може нагріватися. Переконайтеся, що ви підключили пристрій до правильно встановленої розетки, щоб уникнути ризику пожежі та опіків.

**НЕ** піддавайте пристрій сильним ударам, щоб уникнути ризику пошкодження лампи.

**УВАГА:** Завжди від'єднуйте прилад від мережі після використання та у разі відключення електроенергії, щоб уникнути ризику пошкодження пристрою.

Класифікація групи ризику: "ризик мінімальний або відсутній"

Тримайте пристрій у недоступному для дітей та домашніх тварин місці.

**НЕ** піддавайте оброблені ділянки сонячному світлу. Зачекайте щонайменше 48 годин після обробки, перш ніж піддавати оброблену шкіру впливу прямих сонячних променів. Ваша шкіра може бути дуже чутливою після процедури IPL, особливо уразливою до сонячних опіків. Нанесіть сонцезахисний крем (SPF 15 або вище) на оброблену ділянку або накрийте оброблену ділянку належним одягом.

## 1.3 Застереження

Пристрій призначений для одного користувача.

Для використання не потрібні професійні навички та навчання, перед використанням ознайомтеся з інструкцією користувача.

Цей пристрій не рекомендується використовувати на рудому, сивому, світлому або пушковому волоссі, оскільки він неефективний на такому волоссі.

Цей пристрій не рекомендується для використання на бороді чоловіків або в будь-якій ділянці, де ви хочете, щоб волосся знову виростало, оскільки результати можуть бути незворотними.

## 2. Інформація про пристрій

Назва пристрою: IPL Hair Removal Device

Модель пристрою: UI04 DG, UI04SD, UI04 BU, UI04 PL, UI04 LG, UI04 MG, UI04 PN, UI04 GY, UI04 CB, UI04 BN, UI04 SG

### 2.1 Показання до застосування


IPL-Пристрій для видалення волосся призначений для видалення небажаного волосся, а також для покращення зовнішнього вигляду шкіри.

### 2.2 Комплектація

Відкривши упаковку, ви побачите наступний вміст:

IPL-пристрій для видалення волосся *1	Кабель живлення *1	Бритва*1
Адаптер *1	Інструкція користувача *1	Окуляри*1

### 2.3 Будова пристрою

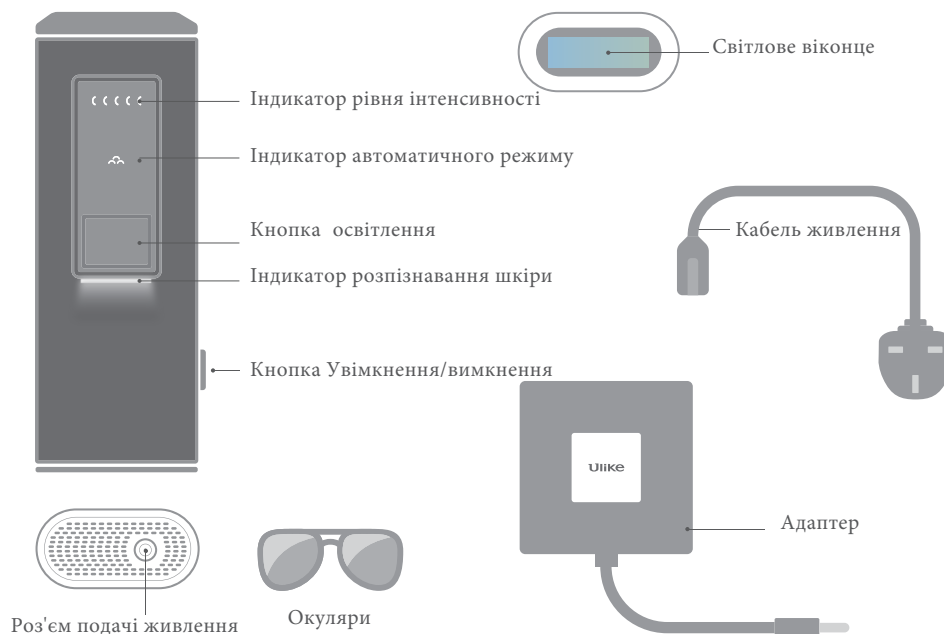

## 2.4 Принцип роботи

IPL-Пристрій для видалення волосся є пристроєм на основі інтенсивного імпульсного світла для тривалого видалення волосся, призначеним для домашнього використання. Він призначений для видалення небажаного волосся та тривалого зниження повторного росту волосся. Ідеальний для видалення небажаного волосся на пахвах, лінії бікіні, руках та ногах. Пристрій використовує технологію IPL з нижчим рівнем імпульсів, включаючи 4 режими потужності. Технологія інтенсивного імпульсного світла здатна досягати тривалих результатів видалення волосся при значно нижчому рівні імпульсів, ніж використовується в інших пристроях для видалення волосся на основі світла. Принцип роботи полягає в селективному фототермолізі, а механізм дії полягає в зупиненні росту волосся за допомогою світла, яке нагріває і нейтралізує волосяну цибулину.

## 3. Інструкція з використання

### 3.1 Зони використання

IPL-Пристрій для видалення волосся призначений для видалення волосся на великих ділянках (наприклад, руки, ноги, груди) і невеликих ділянках (наприклад, пальці, верхня губа). Будь ласка, перевірте таблицю тонів шкіри нижче, щоб визначити, чи підходить вам IPL.

#### **ВИКОРИСТОВУЙТЕ НА ДОПУСТИМИХ ТИПАХ ШКІРИ ТА ВОЛОССЯ**

Цей пристрій призначений лише для використання на типах шкіри I-V за шкалою Фіцпатріка. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ оберіть свій тип шкіри за шкалою фототипування Фіцпатріка, яку розробив дерматолог Гарвардської медичної школи, доктор медичних наук, доктор філософії Томас Фіцпатрик, для класифікації кольору шкіри та її чутливості до сонячного світла. Шкала включає шість типів кольору шкіри. Будь ласка, **ВИЗНАЧТЕ** свій тип шкіри та перевірте наступну діаграму, щоб визначити, чи підходить вам пристрій.

Колір шкіри \ Колір волосся	Колір шкіри					
	Біла	Бежева	Світло-коричнева	Коричнева	Темно-коричнева	Чорно-коричнева і темніша
Біле/Сиве	×	×	×	×	×	×
Руде	×	×	×	×	×	×
Світло-русяве	×	×	×	×	×	×
Світло-каштанове	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Каштанове	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Темно-каштанове	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Чорне	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

(Примітка: × означає не підходить)

### ЗАУВАЖТЕ:

- Виберіть режим, який найкраще відповідає переносимості вашої шкіри, і, якщо немає побічних реакцій, поступово переходьте до режимів з більшою інтенсивністю.
- Колір вашої шкіри може змінитися, наприклад, якщо ви засмагали: вона може бути темнішою, ніж під час попередньої процедури. Тому важливо перевіряти налаштування перед кожним сеансом та встановлювати різні налаштування відповідно до різних ділянок. Деякі ділянки можуть бути темнішими за інші.

## 3.2 Перед використанням




Використайте бритву, що була у комплекті разом із пристроєм, щоб видалити все видиме волосся перед використанням пристрою. Переконайтеся, що на поверхні шкіри не залишилося волосся, оскільки це може викликати дискомфорт під час процедури. Змийте будь-які косметичні засоби, лосьйони та креми з ділянки, яку ви хочете обробити. Очистіть оброблювану ділянку та витріть її насухо.

## 3.3 Тест на чутливість шкіри

Виберіть ділянку тіла, яку плануєте обробляти. Під'єднайте адаптер до пристрою, підключіть кабель живлення та під'єднайте його до джерела живлення. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Щільно притисніть сапфірове світлове віконце до вибраної ділянки шкіри, поки не загориться індикатор датчика шкіри. Перемістіть пристрій на іншу ділянку для тестування та підвищуйте режим, натисніть кнопку освітлення, щоб провести ще один тест. Якщо відчуття комфортні, підвищуйте режим та спробуйте пристрій на іншій ділянці.


Не робіть більше одного спалаху на одному місці. Зачекайте 2 години після тестування, щоб переконатися, що ваша шкіра підходить для процедури і немає негативної реакції на світлові імпульси. Якщо через 2 години не виявлено жодних змін на шкірі, і ви не відічули інтенсивного тепла під час тесту, тоді вищий режим, який ви використовували, підходить для вашої шкіри. Ви можете продовжувати тестувати потужніший режим, поки не знайдете максимальний прийнятний рівень для вибраної ділянки шкіри.

### 3.4 Інструкція

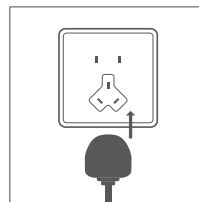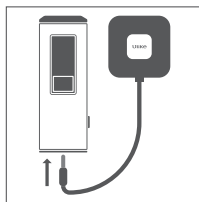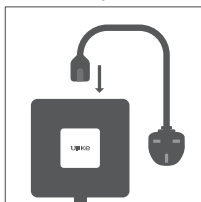


(Будь ласка, використовуйте відповідну вилку живлення в кожній країні)


Підключіть адаптер живлення, як показано на малюнках 1-3 вище.

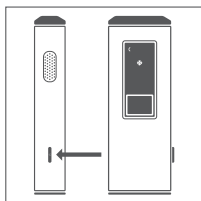



Натисніть і утримуйте кнопку живлення на боковій панелі пристрою, щоб увімкнути пристрій. На екрані відобразиться рівень інтенсивності, функція охолодження буде активована протягом всього процесу видалення волосся. За замовчуванням встановлено рівень інтенсивності 1. Примітка: Функція охолодження призначена лише для покращення досвіду під час видалення волосся та не має терапевтичного ефекту.

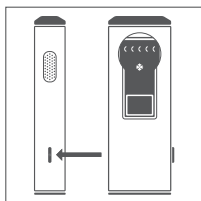


Натисніть кнопку живлення, щоб відрегулювати рівень інтенсивності в послідовності 1-2-3-4-5-4-3-2-1.

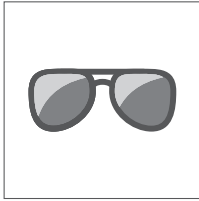

Надягніть захисні окуляри перед початком процедури

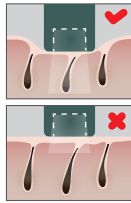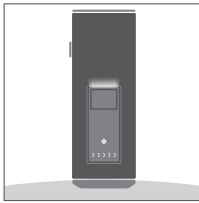

Розмістіть світлове віконце на шкірі під кутом  $90^\circ$ , щоб воно повністю контактувало зі шкірою. Притискайте щільно, поки індикатор розпізнавання шкіри не загориться білим. Натисніть кнопку освітлення для обробки вибраної ділянки. Оброблена шкіра буде теплою. Якщо індикатор не загоряється, це означає, що віконце не має повного контакту зі шкірою. У цьому випадку світлове випромінювання не відбудеться.

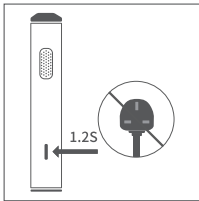


Після завершення процедури натискайте та утримуйте кнопку живлення протягом 1-2 секунд, щоб вимкнути пристрій (НИКОЛИ не виймайте вилку попередньо не вимкнувши пристрій). Пристрій вимкнеться автоматично, якщо протягом 3 хвилин не буде ніякої активності. Примітка: Пристрій має модуль визначення швидкості вентилятора, який моніторить швидкість вентилятора. Коли швидкість вентилятора буде нижчою за 70% початкової швидкості, пристрій автоматично вимкнеться, щоб уникнути перегріву, який може призвести до опіків.

### 3.5 Режими проведення процедури

- **Автоматичний Режим (для великих ділянок, таких як руки, ноги):**

Розмістіть світлове віконце на оброблювану ділянку шкіри так, щоб воно повністю контактувало зі шкірою. У цей момент індикатор розпізнавання шкіри загориться, що свідчатиме про повний контакт віконця зі шкірою. Утримуйте кнопку освітлення, та повільно й рівномірно рухайте пристрій по шкірі, забезпечуючи постійний контакт зі шкірою, спалах буде з'являтися через певні інтервали. Двічі перемістіть пристрій вперед-назад по оброблюваній ділянці, щоб забезпечити рівномірне освітлення і уникнути пропусків.


Порада: швидкість руху пристрою можна регулювати відповідно до швидкості спалаху для більш рівномірного покриття: чим вищий рівень, тим повільніша швидкість спалаху.

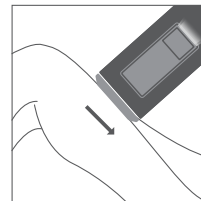

- **Ручний Режим (підходить для малих ділянок, таких як пальці та волосся на губах).**

Помістіть світлове віконце на оброблювану ділянку та забезпечте щільний контакт із шкірою. У цей момент загориться індикатор розпізнавання шкіри, що означає, що світлове віконце повністю контактує зі шкірою. Коротко натисніть кнопку освітлення, щоб розпочати видалення волосся. Перемістіть світлове віконце на наступну ділянку, зачекайте, поки загориться білий індикатор датчика, а потім знову натисніть кнопку освітлення, щоб повторити вищеописану послідовність.

Порада: якщо під час епіляції ви відчуваєте надмірне нагрівання шкіри, зробіть паузу на кілька секунд, щоб дати світловому віконцю охолонути, перш ніж знову використовувати пристрій.

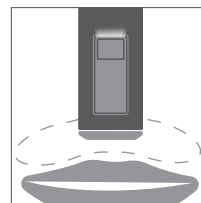

### 3.6 Рекомендований курс процедур

Тиждень 1-4: виконуйте процедуру через день. З 5-го тижня: відкоригуйте графік до одного разу на два тижні або одного разу на місяць, в залежності від росту волосся. Зверніть увагу, що ви можете підлаштувати курс відповідно до типу вашого волосся. Для густого волосся можете розглянути можливість використання більш інтенсивних режимів і частоти процедур із урахуванням вашої чутливості до пристрою. Пам'ятайте: ріст волосся у кожної людини різний, тому результати можуть відрізнятися.

### 3.7 Догляд за шкірою після процедури

Після видалення волосся рекомендується нанести лосьйон для тіла або гель з охолоджуючим ефектом для догляду за шкірою. Не використовуйте засоби для догляду за шкірою, що містять спирт. Не піддавайте оброблені ділянки впливу сонця. Зачекайте принаймні 48 годин після процедури, перш ніж піддавати оброблену шкіру прямому сонячному світлу.

## 4. Технічне обслуговування

### Очищення пристрою

Щоб досягти найкращих результатів і продовжити термін служби пристрою, очищайте його перед кожним використанням і після нього, щоб уникнути накопичення бруду.

- Перед очищенням пристрій необхідно вимкнути та від'єднати від мережі, щоб він охолонув.
- Використовуйте м'яку, чисту та суху тканину, щоб протерти поверхню віконця освітлення.
- Ніколи не мийте продукт та комплектуючі під проточною водою або у посудомийній машині.
- Не використовуйте абразивні засоби (зубна паста тощо) або корозійні рідини (бензин, моторне масло, ацетон тощо) для очищення приладу.
- **Примітка:** Якщо вода погано очищає, скористайтесь тканиною, змоченою в спирті з концентрацією 75%, для очищення пристрою.

### Зберігання

- Щоб уникнути пошкоджень або втрати пристрою та його аксесуарів, зберігайте пристрій та його аксесуари в оригінальній коробці після кожного використання.
- Очистіть пристрій перед тим, як прибрати його для зберігання.
- Зберігайте пристрій у сухому, безпилловому середовищі при температурі від  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

## 5. Утилізація

Щоб зменшити ризики для здоров'я та навколишнього середовища і забезпечити можливість переробки матеріалів, цей пристрій слід утилізувати в спеціалізованому пункті збору для відходів електричних та електронних пристроїв відповідно до місцевих екологічних вимог.



## 6. Усунення несправностей

Нижче наведено короткий опис найбільш поширених проблем, з якими ви можете зіткнутися при використанні пристрою. Якщо ви не зможете вирішити проблему на основі інформації, наведеної нижче, будь ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора або продавця:

Проблема	Можлива Причина	Вирішення
Не вдається запустити пристрій	Пристрій не під'єднано до розетки	Перевірте, чи пристрій під'єднано до розетки.
Пристрій не випромінює світло	Можливо занадто висока температура світлового віконця або тіла; можливо світлове віконце не щільно прилягає до шкіри	Зачекайте, поки пристрій охолоне, перш ніж використовувати його. Тримайте пристрій щільно до шкіри, поки індикатор розпізнавання шкіри не загориться.
Не горить індикатор живлення	Погане живлення	Перевірте, чи працює блок живлення належним чином; негайно відремонтуйте або поверніть пристрій.
Під час освітлення з'являється запах	Дзеркало світлофільтрації засмічене; залишки волосся на поверхні тіла	Протріть фільтр; поголіть волосся та знизьте рівень інтенсивності.
Нестерпний біль під час процедури	Волосся на оброблюваній ділянці не було поголене	Перед використанням цього пристрою збрийте волосся в зоні процедури. Якщо гоління викликає подразнення шкіри, підстрижіть волосся якомога коротше та використовуйте режим меншої інтенсивності.
	Вибраний режим занадто потужний	Виберіть менш інтенсивний та більш комфортний режим
	Світлове віконце пошкоджене	Відремонтуйте або поверніть товар негайно.
Зона обробки червоніє після процедури	Невелике почервоніння є нормальним і безпечним для організму, і незабаром зникне.	Нанесіть гель алое вера, щоб заспокоїти шкіру, або скористайтеся охолоджуючим режимом.
Незадовільний результат видалення волосся	Використання занадто низької потужності	Будь ласка, виберіть потужніший режим наступного разу.
	Пропущені деякі ділянки в оброблюваній зоні	Спалахи мають бути на близькій відстані один від одного, і між зонами спалахів має бути невелике перекриття.
	Цей пристрій не підходить для вашого відтінку шкіри або кольору волосся	Якщо ваше волосся блондинисте, сиве, червоне або біле, процедура не буде ефективною.
	Недостатня частота використання	Для успішного видалення всього волосся рекомендується слідувати запропонованому графіку процедур.
	Ваша реакція на світлові імпульси повільна	Цей пристрій слід використовувати безперервно протягом щонайменше 5 місяців, оскільки він продовжує знижувати ріст волосся протягом цього періоду.
Під час використання пристрій нагрівається і стає вологим	Можливо, через тривалість процедури	Вимкніть пристрій і залиште його на кілька хвилин, дайте йому охолонути перед використанням.

## 7. Технічні характеристики

Назва Пристрою	IPL-Пристрій для видалення волосся
Модель Пристрою	Серія UI04 (UI04 DG, UI04SD, UI04 BU, UI04 PL, UI04 LG, UI04 MG, UI04 PN, UI04 GY, UI04 CB, UI04 BN, UI04 SG). Примітка: Різниця між моделями полягає лише в кольорі корпусу: UI04 DG темно-зелений, UI04 SD білий UI04 BU синій, UI04 PL фіолетовий, UI04 LG світло-зелений, UI04 MG гірчично-зелений, UI04 PN рожевий, UI04 GY сірий, UI04 CB блакитний, UI04 BN чорний, UI04 SG сірий.
Розміри $\pm 10\%$	60(Ширина) x 38(Висота) x 169,9(Довжина)мм.
Вхідна потужність	24В $\approx$ 2.8А
Потужність	67.2Вт
Режими	5 режимів
Розмір світлового вікна	3.3см <sup>2</sup>
Довжина хвилі	550~1200нм
Тривалість імпульсу	0.4~3с
Частота повторення імпульсів	0.33Гц~2.5Гц
Вихідна енергія	4.8Дж~16.5Дж
Енергоємність	1.45Дж/см <sup>2</sup> ~5Дж/см <sup>2</sup>
Діапазон тривалості імпульсу $\pm 20\%$	1.15~6.20мс
Програмне забезпечення	UI04_V1.0
Умови експлуатації	Температура експлуатації 5~30°C Вологість $\leq 80\%$ RH відносної вологості Відносний тиск 86~106кПа
Умови зберігання та транспортування	Температура зберігання: -10~55°C Вологість $\leq 90\%$ відносної вологості Відносний тиск 50~106кПа
Термін служби	Термін служби пристрою та адаптера становить п'ять років, а лампа розрахована на 300 000 спалахів.
Адаптер	Виробник: Dongguan Shilong Fuhua Electronic Co., Ltd. Модель: UES60A1-240280SPA Вхід: Змінний Струм 100В~240В, 50/60Гц 1.5А Вихід: 24.0В 2.8А, 67.2Вт
	Виробник: Mass Power Electronics Inc. Модель: E075-1A240280M2 Вхід: Змінний Струм 100В~240В, 50/60Гц, 1.5А Вихід: 24.0В 2.8А, 67.2Вт

Після зберігання пристрою при найнижчій температурі навколишнього середовища (-10° С) пристрою потрібен певний час, щоб повернутися до нормальної роботи при температурі навколишнього середовища 20°С.	30 хвилин
Після зберігання пристрою при найвищій температурі навколишнього середовища (60°С) пристрою потрібен певний час, щоб повернутися до нормальної роботи.	30 хвилин

## 8. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

### Рекомендації щодо електромагнітної сумісності

**Попередження:** Не використовуйте поблизу активного височастотного хірургічного пристрою та радіоекранованого приміщення системи магнітно-резонансної томографії, де інтенсивність електромагнітних хвиль є високою.

**Попередження:** Слід уникати використання цього пристрою поруч з іншим пристроєм або разом із ним, оскільки це може призвести до неправильної роботи. Якщо таке використання є необхідним, слід спостерігати за обома пристроями, щоб переконатися, що вони працюють нормально.

**Попередження:** Використання комплектуючих, датчиків і кабелів, відмінних від зазначених або наданих виробником цього пристрою, може призвести до збільшення електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості цього пристрою і, як наслідок, до неправильної роботи.

**Попередження:** Портативний радіочастотний пристрій зв'язку (включаючи периферійні пристрої, такі як антенні кабелі та зовнішні антени) слід використовувати на відстані не ближче 30 см від будь-якої частини пристрою, включаючи кабелі, зазначені виробником. В іншому випадку це може призвести до погіршення продуктивності цього пристрою.

Цей пристрій відповідає наступним стандартам:

EN IEC 55014-1

EN IEC 55014-2

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 60335-1

EN 60335-2-23

EN 62233

## 9. Умовні позначення

№	Умовні позначення	Опис
1		Використання в приміщенні
2		WEEE (Відходи електричних та електронних пристроїв). Відходи повинні перероблятися відповідно до законодавства
3		Тримайте в сухому місці
4		Виробник
5		Символ попередження використання IPL (інтенсивне імпульсне світло): випромінювання світла.
6		ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
7		Тип ВF: безпечне застосування аплікаційних частин
8		Джерело постійного струму
9		Максимальна кількість ідентичних транспортних упаковок або товарів, які можна покласти на нижню упаковку, становить 5.
10		Обережно!

## 10. Гарантія

Політика гарантійного обслуговування повністю відповідає чинному законодавству.

На продукт поширюється право на безкоштовне повернення протягом 30 днів та 2-річна гарантія\* починаючи з дати покупки. Однак у гарантії може бути відмовлено за наступних обставин:

- Невиконання інструкцій з експлуатації та обслуговування.
- Неправильне використання, яке спричинило пошкодження приладу.
- Перевищення допустимих умов використання (наприклад, висока температура, корозія тощо), що призвело до пошкодження приладу.
- Сторонні зовнішні впливи (падіння, стиснення, удар тощо), що спричинили пошкодження приладу.
- Природні лиха (пожежа, повінь, блискавка, удар тощо), що спричинили пошкодження продукту.
- Використання комплектуючих та деталей сторонніх виробників, які спричинили пошкодження продукту.

## 11. Уповноважений представник



Назва: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Адреса: Принцес Стріт 89, Манчестер, M1 4HT, Великобританія

Контакт: Уеллс

Телефон: +441616371080

Електронна пошта: [info@apex-ce.com](mailto:info@apex-ce.com)



7210100045

V0

B00

**UI04**

IPL Cooling Hair Removal Device