


Ulike

Air3

Інструкція користувача пристрою для
видалення волосся IPL*

Air Series

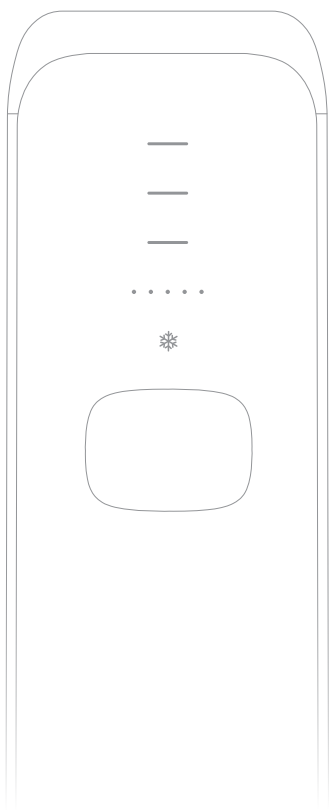

* IPL-пристрій використовує технологію Intense Pulsed Light. За технологією інтенсивного імпульсного світла шкіра обробляється делікатними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Це один із найефективніших методів видалення волосся, що надовго запобігає повторному росту.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію користувача, включаючи всі протипоказання, застереження та інформацію про безпеку, і зберігайте її для подальшого використання. Ілюстрації в цьому посібнику наведені лише для ознайомлення.

Дякуємо, що обрали Ulike.

Компанія Ulike, заснована у 2013 році, з першого дня зосередилась на IPL-пристроях для видалення волосся в домашніх умовах.

Ми вважаємо, що видалення волосся має бути безпечним, комфортним та майже безболісним процесом.

І цей пристрій стане саме тією системою видалення волосся, яка вам сподобається.

Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас електронною поштою, телефоном або зв'яжіться з нами через наш веб-сайт.

Ми завжди готові допомогти!

Україна: <https://ulike-ukraine.com/> & support@ulike-ukraine.com

ЄС: de.ulike.com & de.support@ulikeglobal.com

Велика Британія: uk.ulike.com & uk.support@ulikeglobal.com



Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

1-й корпус, офіс 810, Площа науки і техніки Сюньмей, вул. Кеюань 8,
Спільнота наукових парків, мікрорайон Юехай, район Наньшань,
Шеньчжень 518000, Гуандун, КНР (Китайська Народна Республіка).

■ УВАГА

- Будь ласка, збирайте та використовуйте пристрій точно відповідно до інструкцій, зазначених у даному керівництві.
- Уважно прочитайте інструкцію користувача та зберігайте її для подальшого використання.
- Якщо у вас виникли запитання щодо використання цього пристрою, зверніться до служби підтримки клієнтів Ulike для отримання допомоги.

⊗ **НЕБЕЗПЕКА:** Травми через неправильне використання.

❗ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека через неправильне використання.

⚠ **ОБЕРЕЖНО:** Загроза для особистої безпеки або шкода майну через неправильне використання.

⊗ **НЕБЕЗПЕКА**

• Не спрямовуйте пристрій безпосередньо на очі: яскраве світло, яке випромінює пристрій, може пошкодити очі.

• Під час роботи пристрою не торкайтеся безпосередньо до вентиляційного отвору збоку: температура на виході може спричинити опіки шкіри.

• Не вставляйте жодних предметів у пристрій: це може призвести до травм.

• Немає даних щодо використання цього продукту особами до 18 років. Особи молодше 18 років не повинні торкатися або використовувати цей пристрій. Зберігайте продукт подалі від осіб до 18 років.

• Цей пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.

❗ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

• Будь ласка, не наносьте антиперспірант одразу після обробки області пахв.

• Для уникнення опіків та механічних пошкоджень регулярно очищайте світлове віконце.

• Будь ласка, не розміщуйте світлове віконце поруч з предметами, які можуть спричинити його розмагнічування; це може призвести до поломок або пошкодження.

• Будь ласка, не використовуйте пристрій, коли вентиляційний отвір заблокований; це може призвести до задимлення або пожежі.

• Будь ласка, не спрямовуйте світлове віконце на чорні предмети.

• Для уникнення потемніння, зміни кольору або поломки, будь ласка, не спрямовуйте пристрій на одяг, волосся або інші предмети.

• Будь ласка, не використовуйте продукт на тваринах, оскільки це може їм зашкодити.



- Невиконання інструкцій користувача може призвести до пошкодження шкіри або очей (сліпоти). Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкції.
- Будь ласка, не використовуйте цей продукт занадто часто та не повторюйте обробку однієї області: це може зашкодити вашій шкірі.
- Будь ласка, захищайте очі. Не використовуйте продукт на повіках або поблизу очей.
- Перед використанням протестуйте пристрій на маленькій ділянці шкіри та перевірте оброблену зону через 2 години. Ви можете безпечно використовувати пристрій, якщо на обробленій ділянці не з'являється аномальні ознаки (наприклад, почервоніння або пухирці).
- Будь ласка, будьте у захисних окулярах, які йдуть у комплекті, протягом всього процесу. Тримайте світлове віконце щільно до шкіри, щоб уникнути подразнення очей від яскравого світла.
- Після використання, будь ласка, очистіть пристрій від волосся, бруду та залишків жиру, щоб уникнути механічних поломок і пошкоджень шкіри в подальшому.
- Будь ласка, налаштуйте рівень інтенсивності відповідно до вашого типу шкіри та її стану. Обов'язково почніть з м'якого режиму під час першого використання.
- Невелике почервоніння шкіри після використання є нормальним.
- Будь ласка, вимикайте пристрій, коли не використовуєте його. Не можна залишати увімкнений пристрій без нагляду.
- Якщо температура пристрою перевищує температуру навколишнього середовища на 20 градусів, вимкніть пристрій і зачекайте приблизно 2 години перед повторним використанням.
- Будь ласка, не використовуйте пристрій поруч з легкозаймистими та вибухонебезпечними предметами (наприклад, аерозолями, заправками), оскільки це може призвести до пожежі, електричного шоку та інших небезпек.
- Пристрій слід використовувати при температурі 5-30°C. Перед використанням перевірте температуру в приміщенні.
- Будь ласка, уникайте прямого ультрафіолетового випромінювання на оброблену ділянку протягом 48 годин після використання цього пристрою.
- Будь ласка, не піддавайте продукт тривалому впливу сонячного або ультрафіолетового світла; це може призвести до серйозних пошкоджень.
- Якщо вбудований вентилятор не працює після увімкнення пристрою (немає гудіння), будь ласка, не використовуйте пристрій; подальше використання може призвести до задимлення, поломки, пожежі тощо.
- Не рекомендується використовувати продукт протягом тривалого часу. Будь ласка, вимикайте пристрій на 10 хвилин після 1 години використання.
- Якщо корпус, лінза або джерело живлення пошкоджені, будь ласка, негайно припиніть використання пристрою. Не намагайтеся ремонтувати продукт без офіційного представника Ulike. Пристрій повинен бути відремонтований персоналом з відділу технічного обслуговування виробника або аналогічного відділу.
- Цей продукт підходить не всім. Будь ласка, не використовуйте цей продукт, якщо ви підпадаєте під будь-який з наведених нижче описів.
- Не використовуйте пристрій у ванні, душі або інших місцях поблизу води: Тримайте виріб та адаптер живлення сухими.



■ Неприйнятні умови використання

- Пристрій може викликати дискомфорт або негативні реакції у людей з алергіями, шкірними захворюваннями, алергічним дерматитом, чутливою шкірою тощо. Якщо під час використання виникнуть будь-які побічні реакції, будь ласка, негайно припиніть використання пристрою.
- Не використовуйте пристрій на ділянках шкіри, де є порушення її цілісності (на ділянках з опіками, пухирями, порізами, ранами, активними шкірними захворюваннями або інфекціями).
- Якщо ви приймаєте світлочутливі препарати, перед використанням цього продукту зверніться до лікаря; в іншому випадку використання цього пристрою може пошкодити вашу шкіру.
- Продукт не підходить для вагітних, годуючих жінок, жінок під час менструації, а також для осіб з рубцями, діабетом або чутливою шкірою.
- Людям із серйозними захворюваннями серця, помірною або тяжкою гіпертонією, злоякісними новоутвореннями, фолікулітами, інфекційними шкірними захворюваннями, опіками та порушеннями згортання крові заборонено використовувати цей пристрій.
- Будь ласка, не використовуйте пристрій, якщо у вас порушений метаболізм колагену, включаючи наявність рубців і погане загоєння ран.
- Не використовуйте пристрій, якщо у вас є судинні захворювання, такі як варикоз або гемангієктазія в зоні процедури.
- Не використовуйте пристрій, якщо ваша шкіра чутлива до світла та схильна до висипів або алергічних реакцій.
- Не використовуйте пристрій, якщо оброблювана ділянка інфікована або у вас герпес, шкірні ураження чи гематоми.
- Не використовуйте пристрій, якщо у вас є захворювання, що супроводжуються пригніченням імунної реакції (наприклад, ВІЛ-інфекція, системний червоний вовчак, порфірія тощо).
- Заборонено використовувати цей пристрій пацієнтам з геморагічним синдромом, а також тим, хто використовує ізотретиноїн, альфа-гідроксильну кислоту (АНА), бета-гідроксильну кислоту (ВНА) або азелаїнову кислоту.
- Будь ласка, використовуйте цей пристрій обережно, якщо ви робили хімічну епіляцію протягом останніх 30 днів або нещодавно застосовували засоби для відбілювання шкіри або косметику з вітаміном А.
- Пристрій не можна використовувати разом із засобами на основі ефірних олій. Переконайтеся, що шкіра в зоні обробки чиста і суха, без лосьйонів, лубрикантів чи іншої косметики.
- Якщо шкіра не є чистою і сухою, це може негативно вплинути на ваш досвід використання та навіть пошкодити пристрій.
- Людям, які приймають аспіринові препарати, імуносупресивні засоби, ізотретиноїн та інші препарати, а також тим, хто нещодавно приймав світлочутливі препарати, такі як тетрациклін та сульфаніаміди, заборонено використовувати цей продукт.
- Людям, які нещодавно отримали ін'єкції філерів або токсинів, заборонено використовувати цей продукт.

■ Будь ласка, не використовуйте продукт на наступних ділянках тіла або на ділянках з наступними особливостями:

1/ Ротова порожнина, геніталії, слизові оболонки тощо.	6/ Акне	11/ Всередині пупка
2/ Пластична хірургія або інші хірургічні втручання	7/ Плями та родимки	12/ Велика вена
3/ Шия	8/ Брови	13/ Татування, розпис на тілі
4/ Очні яблука, повіки, навколо очей	9/ Вуха	
5/ Голова	10/ Соски, ареоли	

(Примітка: Цей список не є вичерпним. Якщо ви не впевнені, чи можна використовувати цей продукт, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем.)

■ Після використання пристрою ви можете відчути наступні побічні ефекти:


1/ Опіки	3/ Набряклі волосяні фолікули та пухирі	5/Свербіж та біль
2/ Місцеве почервоніння та набряк	4/ Еритема та пігментація	6/ Рубці

(Примітка: Список не є вичерпним. Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт, будь ласка, зверніться до служби підтримки Ulike або до лікаря.)

⚠ УВАГА

1. Цей пристрій не призначений для лікування захворювань.
2. Не рекомендується використовувати цей пристрій для видалення білого або сивого волосся.
3. Якщо у вас природно темна шкіра, будь ласка, не використовуйте цей пристрій.
4. Будь ласка, не піддавайтеся впливу сонячного світла перед використанням цього пристрою.
5. При першому використанні спробуйте цей пристрій на маленькій ділянці шкіри на руці в режимі "М'який" для перевірки реакції шкіри.
6. Переконайтеся, що світлове віконце щільно прилягає до шкіри перед початком процесу видалення волосся.
7. Не використовуйте цей пристрій в темноті.
8. Щоб уникнути механічних поломок, будь ласка, не використовуйте пристрій під прямим сонячним промінням.
9. Будь ласка, не бийте та не трясіть цей пристрій.
10. Будь ласка, вимкніть пристрій перед тим, як витягти його з електричної розетки; інакше це може пошкодити пристрій.

Примітка: Після використання пристрою, будь ласка, розмістіть пристрій вентиляційним отвором вгору, а віконцем обробки вниз для кращого розсіювання тепла та охолодження.

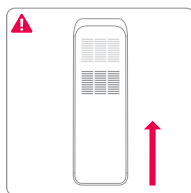


Опис пристрою

■ Про IPL-пристрій для видалення волосся Ulike

•IPL-Пристрій Ulike, на відміну від пристроїв для видалення волосся з увігнутими наконечниками, використовує клінічну технологію контактного охолодження сапфіровим наконечником. Запатентована технологія охолодження сапфіровим льодом від Ulike ефективно охолоджує шкіру, знижує температуру, запобігає опікам і краще захищає шкіру. Під час видалення волосся плоский наконечник з сапфіру притискається до шкіри, впритул наближаючись до волосяних фолікул, тим самим покращуючи ефективність поглинання світла фолікулами. Плоский наконечник з сапфіру легко чиститься та ефективно передає світло для досягнення кращих результатів видалення волосся.

•Довговічність лампи цього пристрою та його універсальність означають, що її не потрібно замінювати, і продукт підходить для кількох зон (таких як обличчя, губи, пахви, лінія бікіні, руки, ноги тощо), що дозволяє заощадити на витратах на заміну лампи. Вам не потрібно купувати комплектуючі або турбуватися про додаткові витрати. Крім того, продукт спроектований таким чином, щоб ефективно фільтрувати неефективні короткі хвилі та шкідливе світло за допомогою високоякісного фільтра.

■ Пристрій та його комплектуючі

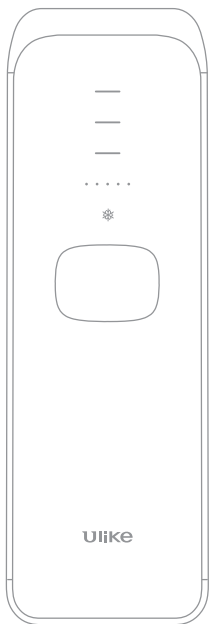

IPL-Пристрій



Кабель живлення




Адаптер



Інструкція користувача




Захисні окуляри

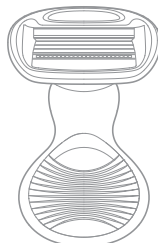


Бритва

■ Будова пристрою

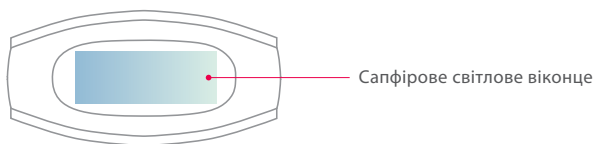

Перед використанням

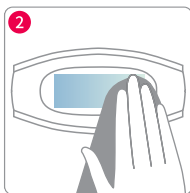

① Ретельно очистіть шкіру.

Переконайтеся, що на шкірі немає волосся або залишків олій (парфумів, лосьйонів, дезодорантів, сонцезахисного крему тощо), і вона повністю суха.

② Переконайтеся, що світлове віконце чисте, без пилу, волосся та бруду, а також не пошкоджене і не має ніяких пошкоджень. Якщо є забруднення, очистіть віконце, щоб уникнути несправностей пристрою, його псування та проблем зі шкірою.

③ Зробіть тестову процедуру перед використанням. Перевірте стан шкіри через 2 години після тесту. Якщо на обробленій ділянці немає аномальних ознак (почервоніння, пухирі), можна безпечно використовувати цей пристрій.

■ Налаштуйте інтенсивність освітлення

Цей пристрій має 3 режими, які відповідають різним ступеням чутливості шкіри та кольору волосся. Нижче наведені відповідні інструкції:

Режими:

М'який режим: Підходить для чутливих ділянок, таких як губи, для людей з темною шкірою та чутливою шкірою тощо.

Нормальний режим: Підходить для частин тіла людей з густим волоссям середньої або низької жорсткості, таких як руки, ноги тощо.

Інтенсивний режим: Підходить для частин тіла з густим і жорстким волоссям, таких як руки, ноги тощо. (Через вищу потужність Інтенсивного режиму ви можете відчувати вищу температуру порівняно з М'яким і Нормальним режимами, це не є несправністю продукту).

• Для вибору відповідного режиму, будь ласка, огляньте таблицю нижче, яка допоможе підібрати режим, що підходить для вашого типу шкіри та кольору волосся:


Колір шкіри \ Колір волосся	Колір шкіри					
	Біла	Бежева	Світло-коричнева	Середньо-коричнева	Темно-коричнева	Чорно-коричнева і темніша
Біле/Сиве	×	×	×	×	×	×
Руде	×	×	×	×	×	×
Світло-русяве	×	×	×	×	×	×
Світло-каштанове	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	М'який режим Нормальний режим	×	×
Каштанове	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	М'який режим Нормальний режим	×	×
Темно-каштанове	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	М'який режим Нормальний режим	×	×
Чорне	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	Нормальний режим Інтенсивний режим	М'який режим Нормальний режим	×	×

(Примітка: × означає не підходить)


Якщо під час використання ви відчуваєте біль або дискомфорт, будь ласка, оберіть інший режим (якщо відчуваєте тепло або легке печіння без болю, це нормально). Людям із темнішим тоном шкіри схильнішим до алергії на шкірі, рекомендується використовувати М'який режим або Нормальний Режим. Будь ласка, переконайтеся, що при першому використанні ви починаєте з М'якого режиму.

Інструкція


■ Рекомендації щодо використання

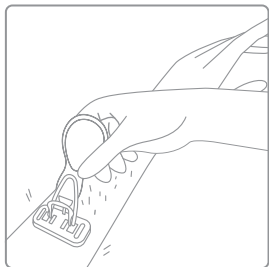

1. Використовуйте бритву для видалення волосся з ділянок, на яких плануєте процедуру. Будь ласка, не прикладайте лезо бритви безпосередньо до шкіри. Використовуйте піну або голіться під час приймання душу. Лезо гостре. Користуйтеся ним обережно, щоб уникнути подряпин.

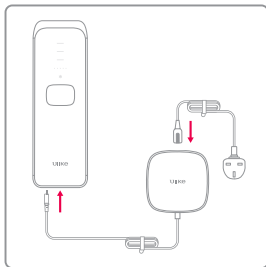


2. Підключіть мережевий шнур до адаптера та вставте його в роз'єм живлення на задній панелі пристрою.

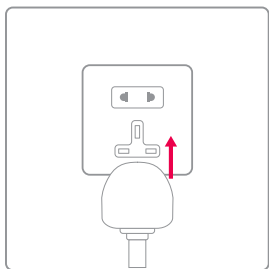


3. Після підключення мережевого шнура до роз'єму живлення пристрою вставте вилку в розетку.




4. Коротко натисніть кнопку Ввімк./Вимк. збоку, щоб увімкнути пристрій; після ввімкнення на дисплеї з'явиться індикатор режиму та функції охолодження.

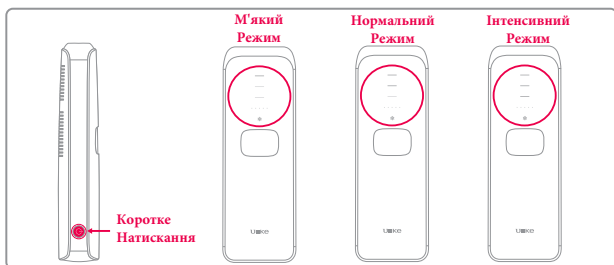


5. Пристрій має три режими. Коротко натисніть кнопку Ввімк./Вимк./Перемикач режимів на боці основного блоку, щоб увімкнути пристрій і переключитися на потрібний режим видалення волосся. Режими змінюються в такому порядку: М'який режим - Нормальний Режим - Інтенсивний режим - Нормальний Режим - М'який режим.

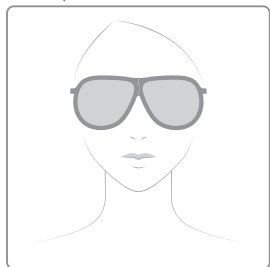

6. Одягніть захисні окуляри перед процедурою, щоб захистити очі.

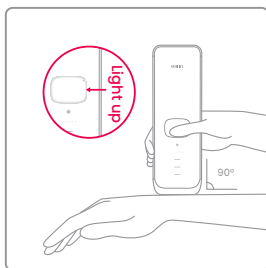

7. Розташуйте пристрій вертикально, щоб світлове віконце щільно прилягало до шкіри, яку потрібно обробити. Засвітиться білий індикатор датчика видалення волосся, що означає щільний контакт із шкірою. Натисніть кнопку освітлення, щоб розпочати процес видалення волосся. Якщо білий індикатор не засвітився, це означає, що світлове віконце не має повного контакту зі шкірою, і пристрій не активується.

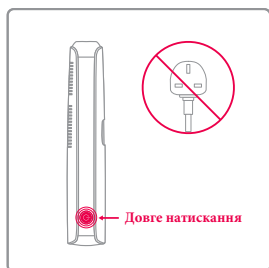


8. Після завершення процедури натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимк. протягом 1-2 секунди, щоб вимкнути пристрій (не виймайте шнур з розетки без попереднього вимкнення пристрою, щоб уникнути пошкодження).

■ Методи проведення процедури

•Автоматичний режим (для великих ділянок, таких як руки, ноги) :

Помістіть світлове віконце на оброблювану ділянку та забезпечте щільний контакт із шкірою. У цей момент загориться індикатор датчика видалення волосся , що означає, що світлове віконце повністю контактує зі шкірою. Натисніть і утримуйте кнопку спалаху протягом 1-2 секунди, і загориться індикатор автоматичного режиму.

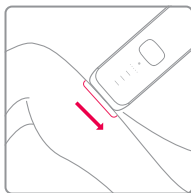

Будь ласка, тримайте світлове віконце в повному контакті зі шкірою.


Спалахи будуть випромінюватися через певні проміжки часу.

Продовжуйте рухати пристрій. Двічі перемістіть його вперед-назад по оброблюваній ділянці, щоб забезпечити рівномірне освітлення і уникнути пропусків.

Порада: Ви можете регулювати швидкість руху залежно від швидкості спалахів, щоб пристрій міг рівномірно покривати ділянку. Частота спалахів в М'якому режимі вища, а в Нормальному Режимі – трохи нижча. Крім того, чим вищий рівень, тим повільніше буде випромінюватися світло.

•Точковий метод (підходить для невеликих ділянок, таких як пальці та верхні губи):


Помістіть світлове віконце на оброблювану ділянку та забезпечте щільний контакт із шкірою. У цей момент загориться індикатор датчика видалення волосся , що означає, що світлове віконце повністю контактує зі шкірою. Коротко натисніть кнопку освітлення, щоб розпочати видалення волосся. Перемістіть світлове віконце на наступну ділянку, зачекайте, поки загориться білий індикатор датчика епіляції, а потім знову натисніть кнопку освітлення, щоб повторити вищеописану послідовність.

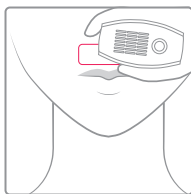

Порада: якщо під час епіляції ви відчуваєте надмірне нагрівання шкіри, зробіть паузу на кілька секунд, щоб дати світловому віконцю охолонути, перш ніж знову використовувати пристрій.

Поради щодо використання Ulike Air Series

1. Через постійні спалахи цей пристрій буде нагріватися. Для підтримки оптимального охолоджувального ефекту ми рекомендуємо використовувати світлове віконце на оброблюваній ділянці близько 30 секунд після спалаху, перш ніж переходити до наступної ділянки.

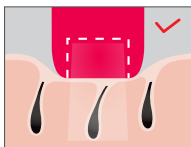

2. Для найкращих результатів щільно притискайте світлове віконце до шкіри, щоб головка лампи була в повному контакті із тілом. Таким чином, пристрій може заздалегідь охолоджувати шкіру, знижувати нагрів і краще захищати бар'єр шкіри.



Частота використання

Тижні 1-4
3 рази на тиждень

з 5 тижня
кожні півмісяця або місяць

Використовуйте 3 рази на тиждень протягом тижнів 1-4; Використовуйте кожні півмісяця або місяць з 5 тижня. Примітка: Використовуйте пристрій залежно від росту волосся. Для густого волосся можна збільшити рівень і частоту використання, враховуючи конкретну ситуацію, яка може варіюватися у різних осіб.

Догляд за шкірою після використання

Заходи обережності після видалення волосся за допомогою цього пристрою:

- Рекомендується уникати контакту обробленої ділянки з водою протягом 6 годин після видалення волосся. Після цього можна зволожити оброблену ділянку.
- Будь ласка, не використовуйте парфуми, маски для обличчя або косметику з екзfolіаційними частинками на обробленій ділянці після видалення волосся.
- Уникайте впливу ультрафіолетового світла протягом 48 годин після видалення волосся. Наносьте сонцезахисний крем за потребою.
- Штучний загар заборонено під час процесу видалення волосся.
- Якщо вам потрібна пластична операція на обробленій ділянці, проконсультуйтеся з лікарем.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт, припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.

■ Очищення та обслуговування

Щоб досягти найкращих результатів і продовжити термін служби пристрою, очищайте його перед кожним використанням і після нього, щоб уникнути накопичення бруду. Неналежний догляд за цим пристроєм негативно вплине на його функціональність та ефективність.

- Перед очищенням пристрій необхідно вимкнути та від'єднати від мережі, щоб він охолонув.
- Використовуйте м'яку, чисту та суху тканину, щоб протерти поверхню віконця освітлення.
- Зберігайте пристрій у сухому, безпиловому середовищі при температурі від -10° С до +55° С.
- Ніколи не мийте продукт та комплектуючі під проточною водою або у посудомийній машині.
- Не використовуйте абразивні засоби (зубна паста тощо) або корозійні рідини (бензин, моторне масло, ацетон тощо) для очищення приладу.



Примітка: Якщо вода погано очищає, скористайтесь тканиною, змоченою в спирті з концентрацією нижче 95%, для очищення пристрою.

■ Утилізація

Утилізуючи цей виріб, не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами. Натомість надішліть його до спеціального центру переробки.



ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Цей розділ описує проблеми, з якими ви можете стикнутися під час використання цього пристрою. Якщо ви не можете вирішити проблему за допомогою наданих рішень, будь ласка, зверніться до служби підтримки Ulike у вашій країні/регіоні.

•Якщо виникла проблема, яку неможливо усунути, зверніться до відділу сервісного обслуговування клієнтів.

•Будь ласка, зберігайте рахунок-фактуру та гарантійний талон. Вам потрібно буде надати цю документацію у разі несправності пристрою.

Цей пристрій відповідає наступним стандартам:

EN 55014-1

EN55014-2

EN 61000-3-2

EN61000-3-3

EN 62233

EN 60335-1

EN 60335-2-23

IEC 60335-2-113

IEC 62471

BS EN 60335-2-23

BS EN 60335-1

BS EN 62233

BS EN 55014-1

BS EN 55014-2

BS EN IEC 61000-3-2

BS EN 61000-3-3

Усунення несправностей

Проблема	Можлива Причина	Вирішення
Не вдається запустити пристрій	Пристрій не під'єднано до розетки	Перевірте, чи пристрій під'єднано до розетки.
Пристрій не випромінює світло	Температура пристрою занадто висока. Або віконце освітлення може бути не в повному контакті з вашою шкірою	Зачекайте, поки пристрій охолоне природним шляхом, перед тим як продовжити. Перевірте, чи світлове віконце щільно прилягає до шкіри — зверніть увагу на світловий індикатор.
Робочий індикатор не горить	Пристрій має дефект або не функціонує належним чином	Перевірте, чи належно працює джерело живлення. негайно відремонтуйте або поверніть пристрій.
Під час освітлення з'являється запах	У дзеркало світлофільтрації потрапило волосся, яке залишилося на оброблюваній ділянці	Протріть дзеркало світлофільтрації. Збрийте волосся з оброблюваної ділянки. Знизьте рівень потужності пристрою.
Нестерпний біль під час процедури	Волосся на оброблюваній ділянці не було поголене	Перед використанням цього пристрою збрийте волосся в зоні процедури. Якщо гоління викликає подразнення шкіри, підстрижіть волосся якомога коротше та використовуйте режим меншої інтенсивності.
	Обрана зона не підходить для процедури згідно з наданими вище вказівками	Не використовуйте цей пристрій на внутрішніх статевих губах, вагіні, анусі, сосках та ареолах. Чоловікам не слід використовувати цей продукт на обличчі чи геніталіях.
	Вибраний режим занадто потужний	Зменшіть рівень інтенсивності до комфортного для вас рівня.
	Світлове віконце пошкоджене	Негайно зверніться до служби підтримки Ulife, щоб узгодити ремонт або повернути пристрій.
Зона епіляції червоніє після процедури	Невелике почервоніння є нормальним і безпечним для організму, і незабаром зникне	Нанесіть гель алое вера, щоб заспокоїти шкіру, або скористайтеся охолоджуючим режимом.
Незадовільний результат видалення волосся	Використання занадто низької потужності	Виберіть потужніший режим наступного разу.
	Ви не натиснули кнопку освітлення під час переходу до наступної ділянки	Натискайте кнопку освітлення, коли переходите до наступної ділянки. Між різними ділянками має бути деяке перекриття.
	Цей пристрій не підходить для вашого відтінку шкіри або кольору волосся	Якщо ваше волосся блондинисте, сиве, червоне або біле, процедура не буде ефективною.
	Недостатня частота використання	Для кращих результатів видалення волосся ми рекомендуємо дотримуватись наданого режиму процедур.
	Ваша реакція на світлові імпульси повільніша і може зайняти більше часу, ніж очікувалося	Цей пристрій слід використовувати безперервно протягом щонайменше 5 місяців, щоб повністю пригнітити ріст волосся.
Під час використання пристрій нагрівається і стає вологим	Продукт використовувався протягом тривалого часу	Вимкніть пристрій і дайте йому повністю охолонути перед повторним використанням.

Гарантійні умови

•Термін гарантії на цей пристрій може змінюватися залежно від законодавства країни, в якій він продається.

•Термін гарантії на цей пристрій, кабель живлення та вбудовані аксесуари становить 2 роки з дати покупки.

•Якщо пристрій має дефекти протягом гарантійного періоду, компанія Ulike відремонтує або замінить його безкоштовно. Однак пошкодження, спричинені неправильним використанням, не покриваються гарантією. У такому випадку компанія Ulike замінить пошкоджену частину або старий пристрій за початковою вартістю. Старий пристрій буде повернуто в компанію Ulike.

• Для отримання обслуговування надайте свій гарантійний талон. Термін гарантії на продукт залежить від дати покупки. Якщо дата покупки відсутня, термін гарантії буде рахуватися від дати виробництва. У наступних випадках компанія Ulike може не надати гарантійне обслуговування, повернення коштів або заміну: Ulike не несе відповідальності за повторну видачу рахунку-фактури та гарантійного талона. Будь ласка, зберігайте рахунок-фактуру та гарантійний талон.

1.Пошкодження пристрою, спричинене непередбачуваними подіями, такими як пожежа, землетрус, повінь тощо.

2.Пошкодження пристрою, спричинене недбалістю, неналежним використанням або використанням за аномальних умов.

3.Пошкодження пристрою, спричинене самовільним розбиранням і неналежним зберіганням (наприклад, пошкодження гризунами або проникнення рідини).

4.Пошкодження пристрою, спричинене використанням продукту в неналежних умовах, включаючи, але не обмежуючись, надмірним навантаженням.

5.Пошкодження пристрою, спричинене іншими факторами, які не підлягають контролю з боку Ulike.

6.Компанія Ulike не несе відповідальності за пошкодження, пов'язані з функціонуванням або використанням цього пристрою (наприклад, втрата комерційних вигод, переривання бізнесу, інші втрати, спричинені використанням пристрою, витрати на заміну обладнання, пристроїв або послуг, пов'язаних із використанням цього продукту, претензії клієнтів тощо).

Залежно від типу та обсягу нещасного випадку, компанія Ulike нестиме відповідальність відповідно до чинних законів та нормативних актів.**

Уповноважений представник



Назва: Ulike Europe SAS
Адреса: вул. Рояль 4, 75008, Париж, Франція
Контакт: Рафаель.
E-Mail: contacteurope@ulikeglobal.com



Назва: Kingsmead Service Limited
Адреса: 19-й мезонін, вул. Кроуфорд 19-21,
Лондон, Англія W1H 1PJ
Контакт: Пень Ян
E-mail: office@kingsmead-service.com

Технічні характеристики

Характеристики:	
Air3 Series	Назва Пристрою : IPL-Пристрій для видалення волосся
	Модель Пристрою : UI06
	Розміри : 179*58*34мм
	Вхідна потужність : 24В ---2.8А
	Потужність : 67.2ВТ
	Режими : 3 режими
	Розмір світлового віконця : 3.3см ² ±0.25см ²
	Spectrum : 550-1200нм
	Довжина хвилі : 1.12мс-7.44мс
	Частота повторення імпульсів : 0.33Гц-2.5Гц
	Виробник : Shenzhen Ulike Smart Electroics Co., Ltd
	Адреса : 1-й корпус, офіс 810, Площа науки і техніки Сюньмей, вул. Кеюань 8, Спільнота наукових парків, мікрорайон Юехай, район Наньшань, Шеньчжень 518000, Гуандун, КНР (Китайська Народна Республіка).

Умови зберігання та транспортування		Умови експлуатації	
Температура зберігання	-10-55°C	Експлуатаційна температура	5-30°C
Вологість	≤90%ВВ	Вологість	≤80%ВВ
Відносний тиск	50-106 кПа	Відносний тиск	80-106кПа